

Occlusal Reduction Kit & Tapered Occlusal Reduction Kit

Die MEISINGER Occlusal Reduction Kits ermöglichen die Durchführung präziser okklusaler Reduktionen. Dank des einzigartigen, abgewinkelten Tiefenstopps wird ein genau definierter Abtrag ermöglicht. Die vertikale Orientierung sorgt zudem für einen guten Zugang zu Fissuren und Grübchen. Mit Hilfe dieser diamantierten Bohrer werden partielle Vertiefungen auf der Okklusalfäche erstellt, welche beim Verbinden eine perfekt ebene Reduktion ergeben. Die Bohrer sind, entsprechend angepasst auf verschiedene Restaurationsmaterialien, in den Längen 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.2 mm und 2.4 mm verfügbar. Ein Bohrer zur labialen Reduktion mit 1.0 mm Länge ist ebenfalls im Kit enthalten. Die Bohrer im Occlusal Reduction Kit sind zylindrisch, beim Tapered Kit konisch.

Made in
Germany



Auf einen Blick















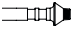
- Durchführung präziser Tiefenreduktion
- Genau definierter Abtrag
- Einfache Handhabung
- Anpassung an unterschiedliche Restaurationsmaterialien durch unterschiedliche Längen

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

Occlusal Reduction Kit & Tapered Occlusal Reduction Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	2565	-	-	-	-	84,09 €	
	828G	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828O	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828Y	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828B	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828R	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828W	FG L (315)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	2565T	-	-	-	-	84,09 €	
	828TG	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828TO	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828TY	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828TB	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828TR	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	
	828TW	FG (314)	017	160.000-250.000 min ⁻¹ / 250.000 min ⁻¹	1	8,43 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL115 - 0317