

Trephine Ejection Kit

By Prof. Dr. Fouad Khoury

In diesem Trepan Set, das zusammen mit Prof. Dr. Fouad Khoury entwickelt wurde, stecken gleich mehrere einzigartige Ideen, die das Set zu etwas ganz Besonderem machen: Innengekühlte Trepane ermöglichen eine sichere Entnahme von Knochenzylindern, z.B. aus der retromolaren Region des Unterkiefers. Die Innenkühlung verhindert zuverlässig eine Schädigung des Knochengewebes durch Überhitzung. Die abnehmbaren Trepan-Arbeitsteile sorgen für eine besonders einfache Entnahme der herausgefrästen Knochenzylinder. Die Arbeitsteile können ganz einfach vom Trepan-Schaft abgenommen werden, sodass

die Knochenzylinder mit Hilfe der speziell auf die Trepan-Durchmesser abgestimmten Ausstoßinstrumente herausgeschoben werden können. Weiter beinhaltet das Set Vorkörner-Trepane, die einer sicheren Trepan-Anwendung dienen. Die Durchmesser der Vorkörner-Trepane entsprechen denen der Trepane. Die verschiedenen Instrumentengrößen sorgen für hohe Flexibilität in der Anwendung. Weiter vereinfacht das Prinzip der abnehmbaren Trepan-Arbeitsteile die Entnahme der Knochenzylinder extrem, sodass dem Anwender ein schnelles und sicheres Arbeiten möglich ist.



Auf einen Blick




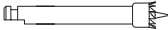
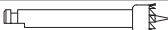

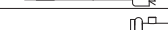










- Genormte Durchmesser der Trepan-Arbeitsteile ermöglichen die planbare Entnahme definierter Knochenzylinder
- Exakt aufeinander abgestimmte Instrumente für höchste Präzision
- Innovative Anwendung
- Schutz vor Überhitzung des empfindlichen Knochengewebes durch innengekühlte Trepane
- Tiefenmarkierungen an den Trepanen ermöglichen die planbare Entnahme definierter Knochenzylinder

Bei weiteren Fragen berät Sie unser Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger since 1888

Trephine Ejection Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	79BTE00	-	-	-	-	595,00 €	
	230KH	RA (204)	021	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	025	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	029	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	033	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	229KH	RA (204)	-	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	4	34,50 €	
	229KH	unmontiert	021	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	025	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	029	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	033	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	ASTKH	-	021	-	1	29,50 €	
	ASTKH	-	025	-	1	29,50 €	
	ASTKH	-	029	-	1	29,50 €	
	ASTKH	-	033	-	1	29,50 €	
	ASHKH	-	-	-	1	29,50 €	
	HRKH	-	-	-	1	49,50 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL119 - 0317