

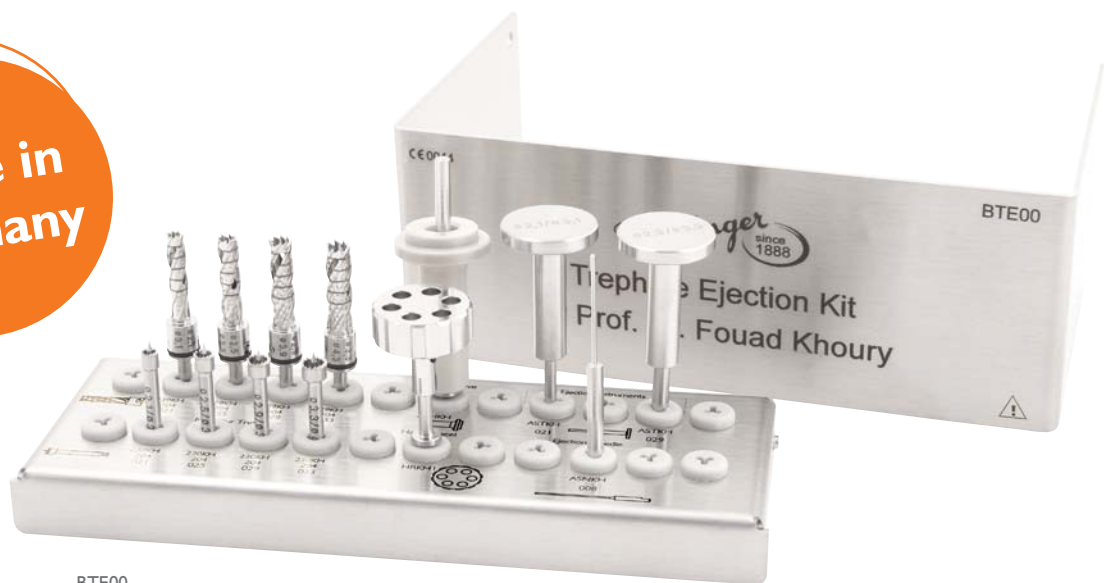
Trephine Ejection Kit

By Prof. Dr. Fouad Khoury

In diesem Trepan Set, das zusammen mit Prof. Dr. Fouad Khoury entwickelt wurde, stecken gleich mehrere einzigartige Ideen, die das Set zu etwas ganz Besonderem machen: Zweiteilige, innengekühlte Trepane ermöglichen eine sichere und minimalinvasive Entnahme von lokalen Knochenzylindern. Die Innenkühlung verhindert dabei zuverlässig eine Schädigung des Knochengewebes durch Überhitzung, während die abnehmbaren Trepan-Arbeitsteile eine besonders einfache Entnahme der herausgefrästen Knochenzylinder erlauben. Die Knochenzylinder können entweder mit Hilfe der Ausstoßnadel oder mit den

speziell auf die Durchmesser der Trepane abgestimmten Ausstoßinstrumente herausgeschoben werden. Zusätzlich ermöglichen die darüber hinaus im Set enthaltenen Vorkörner eine besonders sichere Anwendung der Trepane.

Dank der zweiteiligen Trepane, der Auswahl an verschiedenen Durchmessern und der optimalen Abstimmung der Instrumente, bietet das Trephine Ejection Kit dem Anwender höchste Effizienz, Flexibilität und Präzision bei der Entnahme von Knochenzylindern.



BTE00

Auf einen Blick



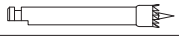
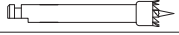
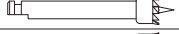
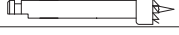
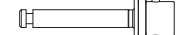




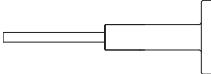
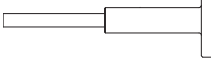
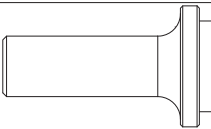
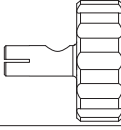

- Zweiteilige Trepane für die sichere und minimalinvasive Entnahme von Knochenzylindern
- Schutz vor Überhitzung des empfindlichen Knochengewebes durch innengekühlte Trepane
- Innovative Anwendung
- Genormte Durchmesser und präzise Tiefenmarkierungen der Trepane ermöglichen die planbare Entnahme definierter Knochenzylinder
- Exakt aufeinander abgestimmte Instrumente für höchste Präzision und Flexibilität

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger since 1888

Trephine Ejection Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	Innen-/ Außendurchmesser	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	BTE00	-	-	-	-	-	595,00 €	
	230KH	RA (204)	021	2.1 mm / 3.1 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	025	2.5 mm / 3.5 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	029	2.9 mm / 3.9 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	230KH	RA (204)	033	3.3 mm / 4.3 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1	50,70 €	
	229KH	RA (204)	-	-	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	4	34,50 €	
	229KH	unmontiert	021	2.1 mm / 3.1 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	025	2.5 mm / 3.5 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	029	2.9 mm / 3.9 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	229KH	unmontiert	033	3.3 mm / 4.3 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1	39,50 €	
	ASTKH	-	021	-	-	1	29,50 €	
	ASTKH	-	029	-	-	1	29,50 €	
	ASHKH	-	-	-	-	1	29,50 €	
	HRKH1	-	-	-	-	1	49,50 €	
	ASNKH	-	008	-	-	1	29,50 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL119 - 0118