

Endo Access Bur Kit

Einfache und sichere Endodontie Behandlungen

Optimieren Sie den Prozess der koronalen Wurzelkanalaufbereitung mit dem MEISINGER Endo Access Bur Kit. Das Kit beinhaltet eine Zusammenstellung aller Meisinger Endo Access Burs, mit denen der sichere Zugang zum Wurzelkanal ermöglicht wird. Anders als Standardbohrer, die die Sicht auf das Arbeitsfeld einschränken, ermöglichen die Endo Access Burs dank ihrer langen, dünnen Hälse uneingeschränkte Sicht. Diese einzigartigen Bohrer erlauben dem Anwender die

einfache und sichere Eröffnung und Erweiterung der Kanalöffnung für einen idealen, geradlinigen Zugang zum Wurzelkanal. Aufgrund der speziellen, hochstabilen Konstruktion bieten die Endo Access Burs einen optimalen, vibrationsarmen Rundlauf und erzeugen weniger Hitze und Staub als Ultraschallschulspitzen. Die Farbcodierung ermöglicht eine schnelle Identifizierung und Auswahl der Instrumente.

Made in
Germany



ENDO2

Auf einen Blick






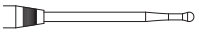









- Optimale, ungehinderte Sicht auf das Arbeitsfeld
- Einfache und sichere koronale Wurzelkanalaufbereitung
- Reduzierte Hitze- und Staubeentwicklung
- Farbcode ermöglicht schnelle Identifizierung und Auswahl der Instrumente
- Erhältlich in den Halslängen 31 mm und 34 mm

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

Endo Access Bur Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	ENDO2	-	-	-	-	129,00 €	
	HM191A	RA L (205)	005	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	006	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	008	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	010	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	012	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	014	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA L (205)	018	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	5,86 €	
	HM191A	RA XL (206)	005	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	
	HM191A	RA XL (206)	006	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	
	HM191A	RA XL (206)	008	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	
	HM191A	RA XL (206)	010	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	
	HM191A	RA XL (206)	012	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	
	HM191A	RA XL (206)	014	500-800 min ⁻¹ / 2.000 min ⁻¹	1	6,17 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Anwendung

- Geradliniger Zugang zum Wurzelkanal
- Erweiterung des axialen Wurzelkanals
- Lokalisierung verborgener Wurzelkanäle
- Zugang zu frakturierten Instrumenten

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.